


ОБТУРА — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Технические характеристики
Размер устройства (Fr)	6 Fr и 8 Fr
Общая длина устройства (мм)	205 ± 10
Рабочая длина устройства (мм)	155 ± 10
Срок полной биodeградации	90 дней
Материал якоря	Поли-(D,L-лактид-когликолид) (PDLG)
Материал устройства	Якорь из PDLG, шовный материал из полигликолиевой кислоты (ПГК) и пробка из бычьего коллагена I типа
Совместимость устройства по размеру	Устройство 6 Fr совместимо с интродьюсерами 6 Fr и 7 Fr Устройство 8 Fr совместимо с интродьюсерами 8 Fr и 9 Fr
Совместимость интродьюсера	Medtronic: Интродьюсер InPut® Cordis Corporation: Интродьюсер AVANTI™ Terumo Corporation: Интродьюсер PINNACLE® Oscor Inc: Adelante® Merit Medical: Prelude®

ОБТУРА - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

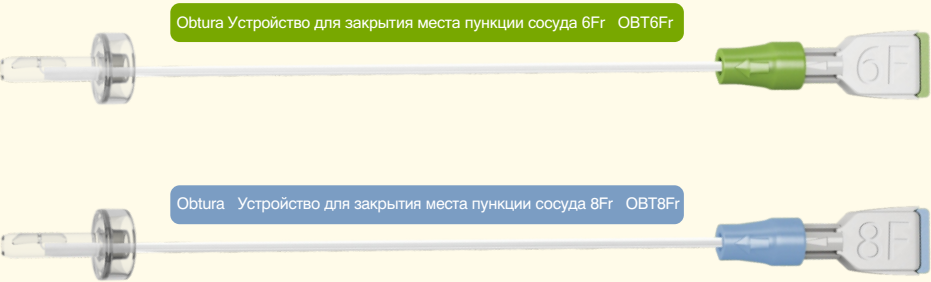

Наличие размеров уточняйте в местном представительстве компании «Мерил».
Obtura™ — зарегистрированная торговая марка компании «Мерил Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» (Meril Life Sciences Pvt. Ltd.).
Устройство Obtura™ не одобрено Агентством по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США и не продается в США.



В жизни есть место большому

Производитель:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191.
Gujarat, India.
Тел.: +91 260 240 8000

Подразделения:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A-Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
Тел. +91 22 39350700
Факс: +91 22 39350777

Meril Inc.
2436 Emrick Boulevard,
Bethlehem, PA 18020
Тел. +610 500 2080
Факс: +610 317 1672

Meril South America
Doc Med LTDA
Alameda dos Maracatins 992,
Edificio Aquarius, Andar 8,
Bloco B, Moema - CEP -04089001,
Sao Paulo, Brazil
Тел.: +5511 2506-3624

Meril GmbH
Bomheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar
Meril Tibbi Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok.
Prestij Plaza No:28
Kat:4 Ataşehir, 34752
Istanbul / Turkey
Тел.: +90 216 641 44 24
Факс: +90 216 641 44 25

Meril China Co. Ltd.
2301 b,23f, Lixin Plaza,
no 90,South Hubin Road,
Xiamen, China
Тел.: 0086-592-5368505
Факс: 0086-592-5368519

Meril SA Pty. Ltd.
102,104, S101 and S102,
Boulevard West Office Park,
142 Western Service Road,
Erf 813 Woodmead Extension 17
Sandton, Johannesburg - 2191
South Africa
Тел.: +2711 465-2049
Факс: +27 86 471 7941

ООО «Мерил Медикал»
Пресненская набережная, 12,
Москва, 123112
МФК Федерация 41 этаж, офис 13.
Тел. +7(495)974 29 03

Представитель в ЕС
Obelis S.A.
Bd, General Wahis 53,
1030, Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 732 5954
Факс: +32 2 732 6003
Эл. почта: mail@obelis.net

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com

OBTFBROCHURE008/20211018/GLOBAL



В жизни есть место большому

Obtura™
Устройство для закрытия
места пункции сосуда



Obtura™

Устройство для закрытия места пункции сосуда



В жизни есть место большему

Obtura™ — это удобное механическое устройство для закрытия места пункции сосуда коллагеновой пробкой, которую устанавливают в три простых шага для эффективного гемостаза.



Без замены интродьюсера

Благодаря специальной конструкции устройство Obtura совместимо со стандартными интродьюсерами для интервенционных процедур, что способствует уменьшению кровопотери.


Быстрая остановка крови

Коллагеновая пробка (бычий коллаген I типа) с якорем надежно обхватывает место пункции с двух сторон и способствует быстрому свертыванию крови.


Быстрое рассасывание

Устройство Obtura позволяет бережно закрыть место пункции с помощью имплантата, раскрытие которого проиллюстрировано ниже и который полностью рассасывается.


Уникальная техника раскрытия в 3 шага позволяет сократить продолжительность процедуры и потерю крови

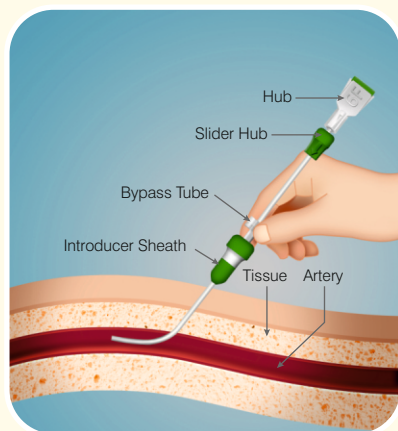

Шаг 1

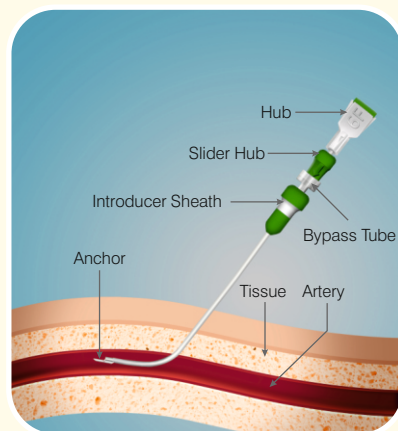

Шаг 2

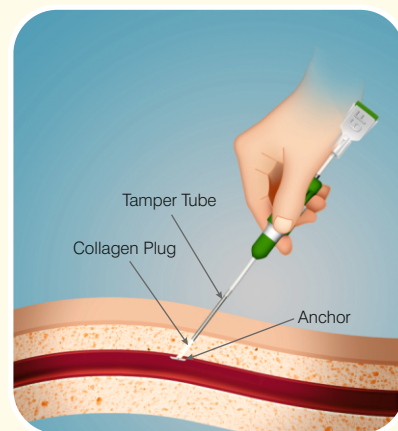

Шаг 3

Результат раскрытия

