


В сердце жизни
В сердце точности



ТСК Myval: Создан для достижения точных результатов

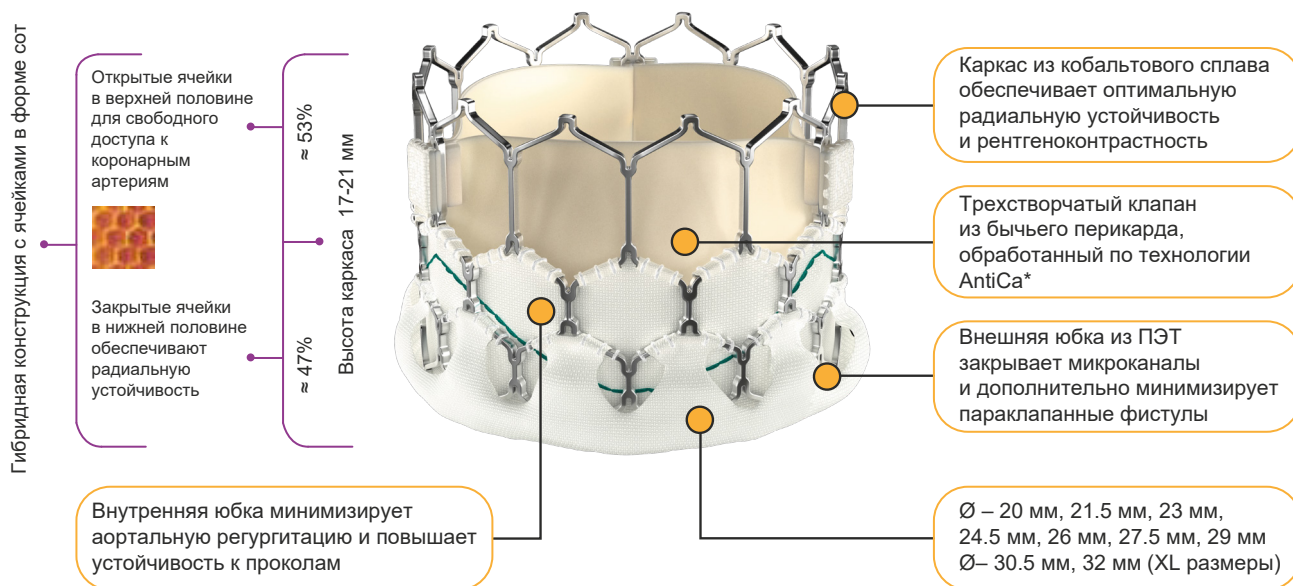

AntiCa* - патентованная технология антикальциевой обработки ткани компании «Мерил»


Navigator — система доставки ТСК

- Рекомендуется кримпировать клапан на баллоне системы доставки Navigator перед введением его в интродьюсер

- Система доставки с кримпированным ТСК Myval заводится через интродьюсер 14 Fr Python



- Кримпирование ТСК Myval непосредственно на баллоне системы Navigator упрощает его доставку и позволяет выполнять процедуру за меньшее количество шагов

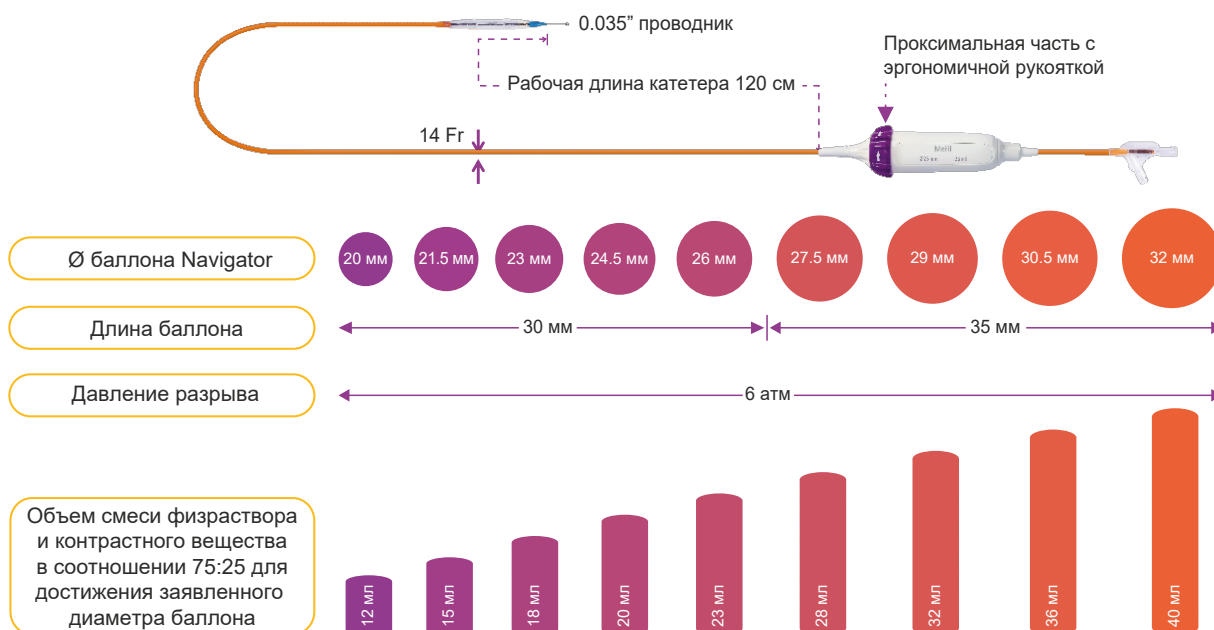


Python — интродьюсер 14 Fr

Совместим со всеми диаметрами TCK Myval (от 20 до 32 мм)

Оболочка интродьюсера раскрывается моментально, подобно питону, заглатывающему жертву
Позволяет легко провести кримпированную систему TCK Myval

- Профиль входа 14 Fr обеспечивает атравматичный чрескожный доступ

- Позволяет легко и удобно извлечь нераскрытую систему TCK Myval

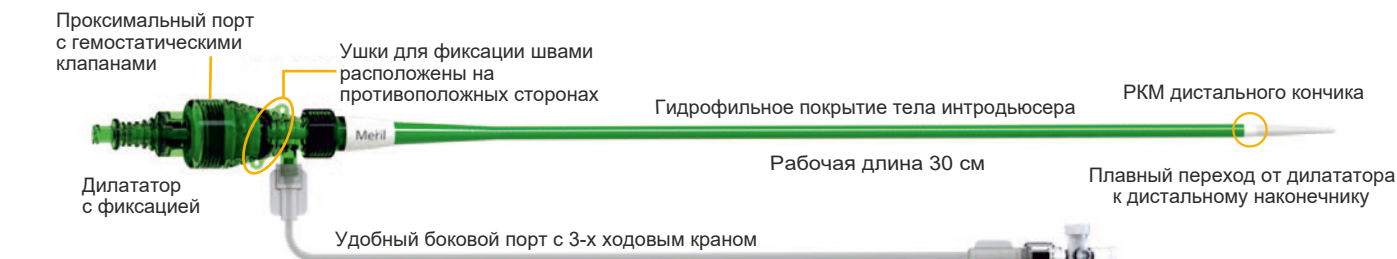


Два отдельных направителя обеспечивают временное открытие гемостатических клапанов для беспрепятственного прохождения кримпированной системы TCK Myval

Ø Общей бедренной артерии* (мм)	Ø TCK Myval (мм)
≥ 5.50 мм	20 мм, 21.5 мм, 23 мм, 24.5 мм
≥ 6.00 мм	26 мм, 27.5 мм, 29 мм
≥ 6.50 мм	30.5 мм, 32 мм

*Ø ОБА оценивают по данным МСКТ, исключая Ca²⁺ по окружности


Mammoth — баллонный дилатационный катетер

Преддилатация выполняется исключительно по усмотрению оператора и не является обязательной

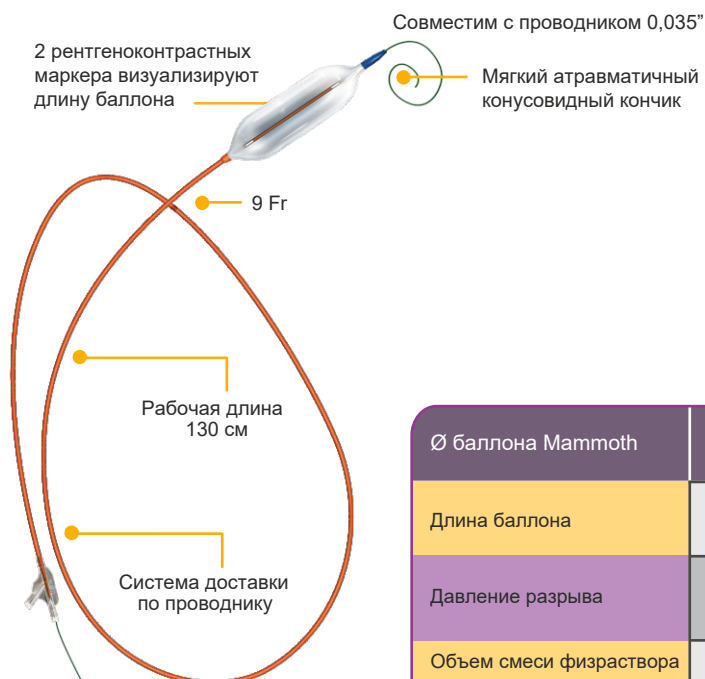

Следует использовать баллон, диаметр которого соответствует короткой оси диаметра кольца клапана по данным МСКТ, чтобы:

- Обеспечить контролируемое и безопасное проведение TCK через суженное фиброзное кольцо (предотвращая резкий прыжок в ЛЖ)

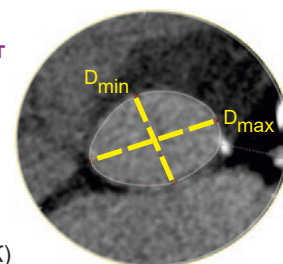

Поперечный срез кольца аортального клапана

Ø баллона Mammoth	14 мм	16 мм	18 мм	20 мм	23 мм	25 мм	28 мм	30 мм
Длина баллона	← 40 мм →							
Давление разрыва	8 атм	← 6 атм →						
Объем смеси физраствора и контрастного вещества в соотношении 75:25 для достижения заявленного диаметра баллона	8 мл	10 мл	13 мл	16 мл	23 мл	25 мл	34 мл	42 мл

ТСК Myval: Система и компоненты — информация для заказа

Myval™ — транскатетерный сердечный клапан (ТСК)

Диаметр	20.0 мм	21.5 мм	23.0 мм	24.5 мм	26.0 мм	27.5 мм	29.0 мм	30.5 мм	32.0 мм
Код продукта	MVL200	MVL215	MVL230	MVL245	MVL260	MVL275	MVL290	MVL305	MVL320

Navigator™ — система доставки ТСК

Диаметр	20.0 x 30 мм	21.5 x 30 мм	23.0 x 30 мм	24.5 x 30 мм	26.0 x 30 мм	27.5 x 30 мм	29.0 x 30 мм	30.5 x 35 мм	32.0 x 35 мм
Код продукта	NVT20030	NVT21530	NVT23030	NVT24530	NVT26030	NVT27530	NVT29030	NVT30535	NVT32035

Mammoth™ — катетер для баллонной дилатации

Диаметр	14.0 x 40 мм	16.0 x 40 мм	18.0 x 40 мм	20.0 x 40 мм	23.0 x 40 мм	25.0 x 40 мм	28.0 x 40 мм	30.0 x 40 мм
Код продукта	MTV1440	MTV1640	MTV1840	MTV2040	MTV2340	MTV2540	MTV2840	MTV3040

Python™ — интродьюсер

Код продукта	PHT14
--------------	-------

Val-de-Crimp™ — инструмент для кримпирования сердечного клапана

Код продукта	VLDC
--------------	------

Myval TCK, Navigator, Python, Mammoth и Val-de-Crimp — это зарегистрированные товарные знаки компании Meril Life Sciences Pvt. Ltd. ТСК Myval, система доставки ТСК Navigator, интродьюсер Python, инструмент для кримпирования Val-de-Crimp и баллон Mammoth являются собственными разработками компании Meril Life Sciences Pvt. Ltd.

Данные изделия предназначены для использования только квалифицированными медицинскими специалистами, прошедшими обучение применению данной методики или под их руководством. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Иллюстрации представляют собой созданные художником изображения, не следует считать их техническими чертежами или фотографиями.

Изделия Myval TCK, Navigator, Python, Mammoth и Val-de-Crimp не одобрены FDA и недоступны на территории США.

Проверьте зарегистрирован ли ТСК Myval в вашей стране.

Производитель
Meril Life Sciences Pvt., Ltd.

Bilakhia House, Survey No. 135/139,
Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat,
396191, India.

Эл. почта: askinfo@merillife.com

Регистрационное удостоверение
в РФ: РЗН 2022/19325

О компании Meril (www.merillife.com)

Компания Meril, основанная в 2006 году, является быстроразвивающейся международной компанией по производству медицинского оборудования, которая занимается проектированием и разработкой новых, клинически значимых и современных медицинских изделий, призванных восстанавливать здоровье и улучшать качество жизни пациентов.

Meril производит медицинские решения в виде устройств для интервенционных вмешательств на коронарных, периферических сосудах и сосудах головного мозга, изделий для лечения структурных заболеваний сердца, ортопедических имплантатов, роботизированных хирургических систем, эндохирurgical инструментов, продукции для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, систем для in-vitro диагностики.

Штаб-квартира компании находится в городе Вапи, штат Гуджарат, Индия. Штат компании насчитывает более 4000 сотрудников, она имеет большое представительство в Индии, а также осуществляет непосредственную деятельность в США, Южной Америке, Великобритании, Западной Европе, Восточной Европы, России, на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, присутствуя в общей сложности более чем в 100 странах.

Компания Meril уделяет огромное внимание инновациям, высокому качеству производства медицинских изделий, клиническим и научным исследованиям, а также обучению и подготовке медицинских работников.



Парк «Мерил»



Академия «Мерил»

